

キンバラG12

歯科鑄造用金銀パラジウム合金 管理医療機器（クラスII）認証番号:225ALBZX00001000
販売名:イシフク キンバラG12

さまざまな保険適用症例に使用でき、
ワンランク上の特性を備えた金銀パラジウム合金

- J I S 種 別：第1種、第2種兼用
- 用 途：インレー、クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、ポスト
- 液 相 点：960℃
- 硬 さ：軟化155HV
硬化305HV
- 質 量：30g
- 熱処理方法：軟化处理/750℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化处理後400℃で20分保持した後、大気放冷





金銀パラジウム合金ろう材

キンバラロウ

歯科用金銀パラジウム合金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00021000
販売名:イシフクキンバラロウ

各種金銀パラジウム合金に適用するろう材

- 用 途：金銀パラジウム合金ろう付
- 液 相 点：820℃
- 形 状：板状
- 質 量：5g

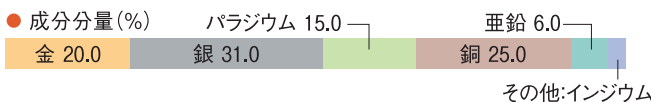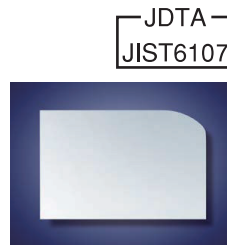


パラロウ25

歯科用金銀パラジウム合金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00022000
販売名:イシフク パラロウ25

流ろう性と操作性に優れたろう材

- 用 途：金銀パラジウム合金ろう付
- 液 相 点：785℃
- 形 状：リボン状
- 質 量：5g

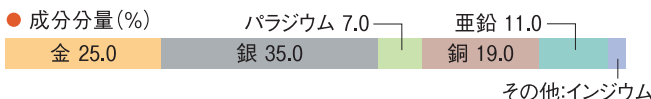

銀ろう材

デントソルダー

歯科用銀ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:15200BZZ00676000
販売名:イシフクデントソルダー

操作性に優れた銀ろう

- 用 途：ステンレス鋼線、ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金などのろう付
- 液 相 点：665℃
- 質 量：10g

